

# MediMix<sup>mini</sup>®



Bezpieczeństwo podczas przygotowania leku



Innowacyjna  
Mała  
Funkcjonalna

# MediMix<sup>mini</sup><sup>®</sup>

niezbędny w każdej aptece szpitalnej

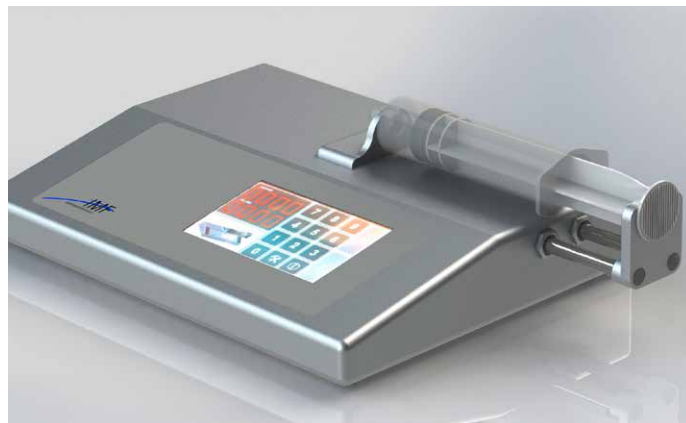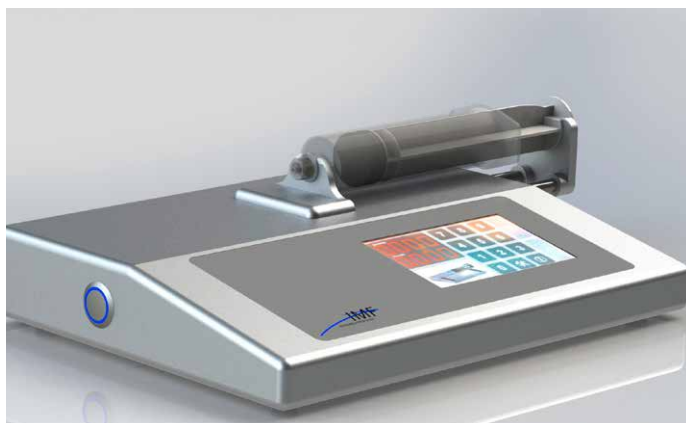

## Zalety systemu

- Duża prędkość napełniania, do 200 ml na minutę
- 4 tryby prędkości: wolny, średni, szybki oraz manualny
- Możliwość ręcznego dostosowania prędkości
- Możliwość indywidualnego programowania
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Przeznaczony do stosowania wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność mieszania i szybkiego precyzyjnego napełniania.
- Duży wybór drenów w zależności od przeznaczenia

## Możliwości systemu

- Rozpuszczanie leków liofilizowanych
- Przygotowanie dużych objętości w workach (0,2 – 1000 ml) pobieranych z ampułek szklanych, z fiolek z korkiem gumowym
- Przygotowanie dawek jednorazowych (np. antybiotyków, leków przeciwwgrzybiczych)
- Przygotowanie indywidualnych dawek (dodawanie leku do rozpuszczalnika)
- Przygotowanie dawek dojelitowych
- Przygotowanie dawek doustnych
- Napełnianie pomp elastomerowych np. Easypump IIk

**Do precyzyjnego dodawania leków i substancji dodatkowych do roztworów w systemie zamkniętym.**

## Dane techniczne

Objętość strzykawki:	50 ml
Maks. prędkość pompowania:	200 ml/min
Dokładność napełniania:	z dokładnością do 1 ml; opcjonalnie 0,1 ml
Zakres mieszania:	5 – 9999 ml
Dokładność mieszania:	mniej niż 1% w przypadku mieszanin o objętości powyżej 10 ml mniej niż 3% w przypadku mieszanin o objętości w przedziale od 5 do 10 ml
Zasilanie:	100-240 V, 50/60 Hz
Obudowa Szer. x Głęb. x Wys.:	280 x 205 x 50 mm
Ciężar:	3,5 kg

## Najczęściej używane zestawy drenów


### MF 4011A

Zestaw MediMix<sup>mini</sup>® 1-drożny  
z końcówką luer-lock

### MF 4011C

Zestaw MediMix<sup>mini</sup>® 1-drożny  
z komorą kroplową

Do przygotowania leków w dawkach indywidualnych

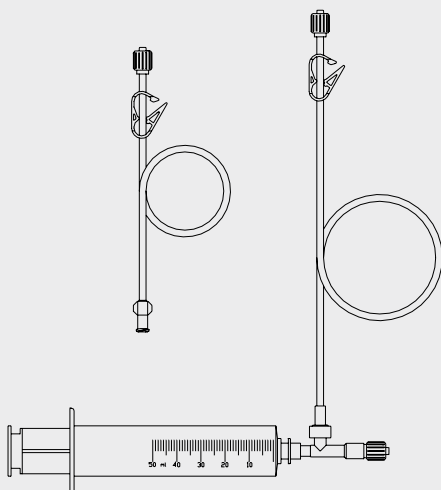

Zastosowanie kranika trójdrożnego DISCOFIX® C - zwiększa jeszcze możliwości zastosowania pompy



### MF 4012A

Zestaw MediMix<sup>mini</sup>® 2-drożny  
drożny z końcówką luer-lock

### MF 4012C

Zestaw MediMix<sup>mini</sup>® 2-drożny  
z komorą kroplową

Do przygotowania leków 2 składnikowych

